


Handhabung des Dreikammerbeutels


1. Entfernen des Umbeutels

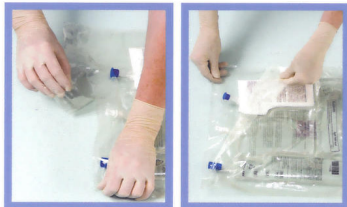

Zum Entfernen des Umbeutels den Beutel waagrecht legen und von der Einrisskerbe in Höhe der Ports her öffnen.

Rand an der Längsseite aufreißen, Umbeutel abziehen und diesen zusammen mit dem Sauerstoffabsorber entsorgen.


2. Öffnen der Peelnähte

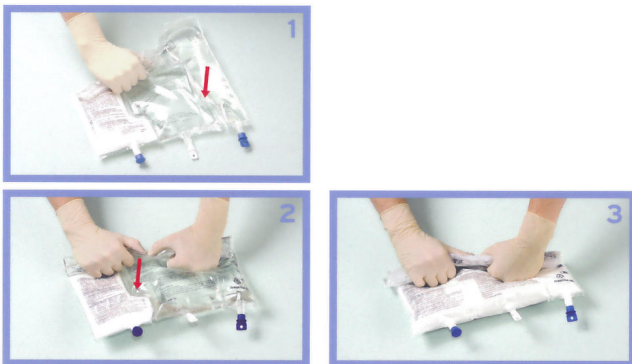

Beutel mit der beschrifteten Seite nach oben auf eine flache Oberfläche legen. Den Beutel mit Druck von rechts oben von der Griffseite her eng aufrollen, bis sich die vertikalen Peelnähte komplett geöffnet haben (siehe Pfeile in Bild 1 und 2).

Achtung: horizontale Peelnäht nicht öffnen.


3. Mischen des Beutelinhalts

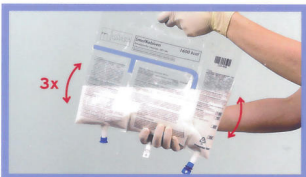

Den 3-Kammerbeutel mehrmals drehen, bis sich die Komponenten gründlich durchmischt haben.

Sicherstellen, dass die Flüssigkeit oberhalb der horizontalen Peelnäht nach dem Mischen komplett in den unteren Bereich des Beutels geflossen ist.

4. Fertigstellen der Infusionslösung

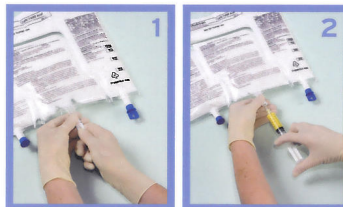


Den Beutel wieder auf eine flache Oberfläche legen. Direkt vor der Injektion der Additiva die weiße Verschlusskappe mit dem nach oben gerichteten Pfeil am Zuspritzport abbrechen (1).

Zuspritzport an der Fingerführung festhalten. Injektionsnadel durch die Mitte des Zuspritzports komplett einführen und die Additiva injizieren (2).

Den Beutelinhalt nach Zugabe jedes Zusatzes durch mehrmaliges Drehen gründlich durchmischen.

Die Membran des Zuspritzports ist bei der ersten Nutzung steril.

5. Einführen des Infusionsbestecks

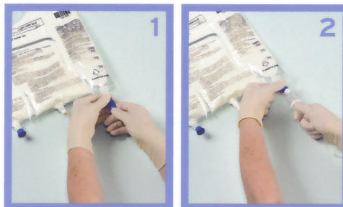

Direkt vor Einführen des Infusionsbestecks die blaue Verschlusskappe mit dem nach unten gerichteten Pfeil abbrechen (1). Ein unbelüftetes Infusionsbesteck benutzen oder ggf. die Belüftungskammer schliessen. Infusionsport an der Fingerführung festhalten.

Spike mit einer leichten Drehbewegung des Handgelenks durch den Infusionsport einführen. Um den Spike sicher zu fixieren, muss er vollständig in den Infusionsport eingeführt sein.

Die Membran des Infusionsports ist bei der ersten Nutzung steril.

6. Aufhängen des Beutels



Den Beutel am Loch unterhalb des Griffes aufhängen.

